

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР**

---

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ**

**Выпуск 21/1**

**Москва 1987**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИЙ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ  
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ВЫПУСК 21/1

Москва 1987


Сборник Методических Указаний составлен методической секцией по промышленной токсикологии при Проблемной комиссии "Научные основы гигиены труда и профпатологии"

Настоящие Методические указания распространяются на измерение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны при санитарном контроле.

Ответственные за выпуск: С.И.Муравьева , Г.А.Дьякова,  
К.М.Грачева , В.Г.Овечкина.

" УТВЕРЖДАЮ "


Заместитель Главного Государственного


 санитарного врача СССР  
 Л.Н. Занченко

" 6 " ~~ноября~~ \_\_\_\_\_ 1966 г.

№ 4209-86

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОТОМЕТРИЧЕСКОМУ  
 ИЗМЕРЕНИЮ КОНЦЕНТРАЦИИ ДИМОРФОЛИНФЕНИЛМЕТАТА  
 (СПИРИТОРА ВНК-Л-20) В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

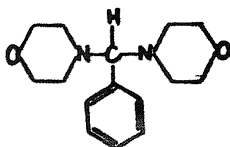

И.м. 262,3

Диморфолинфенилметан — ингибитор ВНК-Л-20 представляет собой порошок белого цвета с Тпл. 96°С. Хорошо растворяется в органических растворителях — ацетоне, диэтиловом эфире, этиловом спирте и др. В воде при 20°С не растворяется.

В воздухе может находиться в виде аэрозоля и паров.

ЛД<sub>50</sub> диморфолинфенилметана — 5060 мг/кг относится к веществам II класса опасности, обладает слабо выраженными комулятивными свойствами.

**ОБУВ** ВНК-Л-20 в воздухе — 10 мг/м<sup>3</sup>

#### Характеристика метода.

Метод основан на реакции взаимодействия диморфолинфенилметана с шикриновой кислотой в последующем фотометрическом измерении окрашенного продукта реакции при 400—450 нм. Отбор проб проводят

с концентрированным на фильтр АФА-УА-18 и поглотительный прибор, выполненный n-гексаном.

Нижний предел измерения содержания вещества в объеме анализируемого раствора 5 мкг.

Нижний предел измерения вещества в воздухе - 2,5 мг/м<sup>3</sup> /при объеме 5 л воздуха/.

Диапазон измеряемых концентраций: от 2,5 до 30 мг/м<sup>3</sup>.

Определению не мешают пестициды Ц-2, БЭА, мешарт М-1, -К-49.

Суммарная погрешность не превышает  $\pm 12,6\%$ .

Время выполнения измерения 2-2,5 ч, включая сбор проб.

Приборы, аппаратура, посуда.

Аспирационное устройство.

Поглотительные приборы с пористой пластинкой.

Фильтродержатели.

Колбы мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 100, 50 и 25 мл.

Цилиндры мерные, ГОСТ 1770-74, вместимостью 10 мл.

Пипетки, ГОСТ 20292-74, вместимостью 1,5, 10 мл с ценой деления 0,01 и 0,1 мл.

Пробирки колориметрические из бесцветного стекла с притертыми пробками, высотой 120 мм, с внутренним диаметром 15 мм, ГОСТ 10315-75.

Воронки стеклянные.

Палочки стеклянные.

Фотоэлектроколориметр ФЭК-56 М.

Реактивы, растворы и материалы.

Диморфолинифенилметан по ТУ 384032-78, ч.

n-Гексан по ТУ 6-09-3375-78, х.ч.

Пикриновая кислота, 0,025% раствор в хлороформе (хранить в темном прохладном месте не более 10 дней).

Хлороформ по ГОСТ 20015-74, х.ч.

Стандартный раствор ВНК-Л-20 Б I с концентрацией вещества 0,1 мг/мл готовят растворением 0,01 г вещества в 100 мл н-гексана. Раствор устойчив 2-3 дня.

Стандартный раствор Б 2 с концентрацией 10 мкг/мл готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора Б I н-гексаном. Раствор устойчив 1 день.

Фильтры АЭА-ХА-18.

#### Отбор пробы воздуха.

Воздух с объемным расходом 1 л/мин аспирируют через фильтр АЭА-ХА-18. При наличии в воздухе паров, пробу воздуха аспирируют, параллельно, со скоростью 0,3-0,5 л/мин через фильтр и поглотительный прибор, содержащий 10 мл н-гексана (при охлаждении), соединенными последовательно.

Для измерения 1/2 ПДК следует отобрать 2,5 л воздуха. (Срок хранения проб не более 3-х суток).

#### Подготовка к измерению.

Приготовление градуировочных растворов. Градуировочные растворы (устойчивы в течение 40 минут) готовят в пробирках с притертыми пробками согласно таблице.

Таблица 6

## Шкала градуировочных растворов

Этап даяга	Стандартный раствор № 2, мл	Стандартный раствор № 1, мл	n-Гексан, мл	Содержание ВВ-Д-20 в градуировочном растворе, мкг
1.	0	-	4,0	0
2.	0,5	-	3,5	5,0
3.	1,0	-	3,0	10,0
4.	-	0,2	3,3	20,0
5.	-	0,3	3,7	30,0
6.	-	0,4	3,6	40,0
7.	-	0,6	3,4	60,0

Во все пробирки шкалы градуировочных растворов добавляют 0,1 мл 0,025% раствора пикриновой кислоты, тщательно перемешивают содержимое каждой пробирки и через 5 мин измеряют оптическую плотность на фотоэлектроколориметре с использованнем синего светофильтра. Измерение проводят в кюветках с толщиной поглощающего слоя 10 мм по отношению к раствору сравнения, не содержащему ВВ-Д-20 (раствор № 1 по табл.).

Строят градуировочный график: на ось ординат наносят значения оптических плотностей градуировочных растворов, на ось абсцисс - соответствующие им величины содержания вещества в градуировочном растворе в мкг.

Проверку градуировочного графика проводят в случае использования новой партии реактивов.

## Проведение измерения.

Фильтр с пробой помещают в пробирку с притертой пробкой и заливают на 30 минут 7-8 мл n-гексана. Затем фильтр извлекают, промывают на воронке над первоначальным экстрактом 3-2 мл гексана

так, чтобы общий объем составил 10 мл. Для анализа отбирают в пробирку 4 мл. Степень десорбции ВУХ-Д-20 составляет 97%.

При анализе параллельной пробы воздуха, содержащей пары, после прекращения отбора, раствор в поглотительном приборе перемешивают, смывая адсорбировавшееся вещество со стенок входной трубки теми же раствором с помощью резиновой груши. Содержимое поглотительного прибора переносят в мерный цилиндр, и измерив объем, для анализа отбирают в пробирку 4 мл. К содержимому пробирок с пробами добавляют 0,4 мл 0,025% раствора пикриновой кислоты и измеряют оптическую плотность аналогично градуировочным растворам по сравнению с контролем, который готовят одновременно и аналогично пробам.

Количественное определение содержания ВУХ-Д-20 в анализируемой пробе проводят по предварительно построенному градуировочному графику.

Концентрация ВУХ-Д-20 "С" в воздухе (в мг/м<sup>3</sup>) вычисляют по формуле:

$$C = \frac{a \cdot b}{b \cdot v}, \text{ где:}$$

- а - содержание ВУХ-Д-20 в анализируемом объеме раствора пробы, найденное по градуировочному графику,  $\frac{\text{мкг}}{\text{раствора}}$ ;
- в - общий объем пробы, мл;
- б - объем раствора пробы, взятый для анализа, мл;
- v - объем воздуха (в л), отобранный для анализа и приведенный к стандартным условиям (см. Приложение I).



## Приложение I

Приведение объема воздуха к стандартным условиям проводят по следующей формуле:

$$V_{20} = \frac{V \cdot (273 + 20) \cdot P}{(273 + t^{\circ}) \cdot 101,33}, \quad \text{где}$$

$V$  - объем воздуха, отобранный для анализа, л.

$P$  - барометрическое давление, кПа (101,33 кПа=760 мм рт.ст.)

$t$  - температура воздуха в месте отбора пробы, °С

Для удобства расчета  $V_{20}$  следует пользоваться таблицей коэффициентов (приложение 2). Для приведения воздуха к стандартным условиям надо умножить  $V$  на соответствующий коэффициент.

## Коэффициент К для приведения объема воздуха к стандартным условиям

°C	Давление P, кПа/мм рт.ст									
	97,33/730	97,86/734	98,4/738	98,93/742	99,46/746	100/750	100,53/754	101,06/758	101,33/760	101,86/764
-30	1,1882	1,1646	1,1709	1,1772	1,1836	1,1899	1,1963	1,2026	1,2088	1,2122
-26	1,1593	1,1456	1,1519	1,1581	1,1644	1,1706	1,1768	1,1831	1,1862	1,1925
-22	1,1212	1,1274	1,1336	1,1396	1,1458	1,1519	1,1581	1,1643	1,1673	1,1735
-18	1,1036	1,1097	1,1158	1,1218	1,1278	1,1338	1,1399	1,1460	1,1490	1,1551
-14	1,0866	1,0926	1,0986	1,1045	1,1105	1,1164	1,1224	1,1284	1,1313	1,1373
-10	1,0701	1,0760	1,0819	1,0877	1,0936	1,0994	1,1053	1,1112	1,1141	1,1200
- 6	1,0540	1,0599	1,0657	1,0714	1,0772	1,0829	1,0887	1,0945	1,0974	1,1032
- 2	1,0385	1,0442	1,0499	1,0556	1,0613	1,0669	1,0726	1,0784	1,0812	1,0869
0	1,0309	1,0366	1,0423	1,0477	1,0535	1,0591	1,0648	1,0705	1,0733	1,0789
+ 2	1,0234	1,0291	1,0347	1,0402	1,0459	1,0514	1,0571	1,0627	1,0655	1,0712
+ 6	1,0087	1,0143	1,0198	1,0253	1,0309	1,0363	1,0419	1,0475	1,0502	1,0557
+10	0,9944	0,9999	1,0054	1,0108	1,0162	1,0216	1,0272	1,0326	1,0353	1,0407
+14	0,9806	0,9860	0,9914	0,9967	1,0027	1,0074	1,0128	1,0183	1,0209	1,0263
+18	0,9671	0,9725	0,9778	0,9830	0,9884	0,9936	0,9989	1,0043	1,0069	1,0122
+20	0,9605	0,9658	0,9711	0,9763	0,9816	0,9868	0,9921	0,9974	1,0000	1,0053
+22	0,9539	0,9592	0,9645	0,9696	0,9749	0,9800	0,9853	0,9906	0,9932	0,9985
+24	0,9475	0,9527	0,9579	0,9631	0,9683	0,9735	0,9787	0,9839	0,9865	0,9917
+26	0,9412	0,9464	0,9516	0,9566	0,9618	0,9669	0,9721	0,9773	0,9799	0,9851
+28	0,9349	0,9401	0,9453	0,9503	0,9555	0,9605	0,9657	0,9708	0,9734	0,9785
+30	0,9288	0,9339	0,9391	0,9440	0,9432	0,9542	0,9594	0,9645	0,9670	0,9723
+34	0,9167	0,9218	0,9268	0,9318	0,9368	0,9418	0,9468	0,9519	0,9544	0,9595
+38	0,9049	0,9099	0,9149	0,9198	0,9248	0,9297	0,9347	0,9397	0,9421	0,9471

## П Е Р Е Ч Е Н Ь

учреждения представивших Методические указания  
по измерению концентрация вредных веществ в  
воздухе

№№ : пп : :	Методические указания	: : :	Учреждения, представ шие Методические ука ния
1 :	2	:	3
1.:	Фотометрическое измерение концентрация: алкилпропилендиаминна	:	Медицинский институт г. Ростов-на-Дону
2.:	Фотометрическое измерение концентрация: бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-ме- тилпиридин) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва Медицинский институт г.Курск
3.:	Газохроматографическое измерение кон- центрация бутоксибутенина	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г.Москва ГОСНИИметанолпроект
4.:	Фотометрическое измерение концентрация: 1,10 декандикарбоновой кислоты (1,10 ДДК)	:	ГорСЭС, г. Москва
5.:	Фотометрическое измерение концентрация: диборида магния, диборида титана-хрома и металлокерамического сплава (на осно- ве диборида титана-хрома)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Свердловск
6.:	Фотометрическое измерение концентрация: диморфолинфенилметана (ингибитора ВНХ-Л-20)	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний г.Ижевск
7.:	Газохроматографическое измерение кон- центрация метилизобутилкарбонла	:	НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, г. Москва

1 :	2	:	3
8. : Газохроматографическое измерение концентрации метилцеллолозы	Киевский филиал : ГосНИИхлорпроект : г.Киев	:	: Медицинский институт г. Ставрополь
9. : Пламеннофотометрическое измерение концентрации стронция фосфорнокислого двухзамещенного	НИИ гигиены труда и профзаболеваний : АМН СССР, г.Москва	:	: ГорСЭС, г.Москва
10. : Газохроматографическое измерение концентрации фенола	Рязанский медицинский институт	:	: ГорСЭС, г.Москва
11. : Газохроматографическое измерение концентрации циклодеканола и циклодеканола	: Рязанский медицинский институт	:	: ГорСЭС, г.Москва
12. : Газохроматографическое измерение концентрации денацила и додецилового спирта	: ГорСЭС, г.Москва	:	: Армянский НИИ ГТ и ПЗ
13. : Спектрофотометрическое измерение концентрации диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевой соли	НИИ гигиены им.Ф.Ф. : Эрисмана, ВНИИХСЭР	:	: ГорСЭС, Москва
14. : Газохроматографическое измерение концентрации карбамил-3(5)-метилпиразола	: ГорСЭС, Москва	:	: НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
15. : Газохроматографическое измерение концентрации триметилфосфита	: Уфимский НИИНЕФТЕХИМ	:	: Рижский медицинский институт
16. : Фотометрическое измерение концентрации цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты тринатриевой соли и расторможенного железного комплекса нитрилотрифенилфосфоновой кислоты динатриевой соли	: Рижский медицинский институт	:	: НИИ гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР
17. : Газохроматографическое измерение концентрации алкилдибензидоксидов (Алотрема-Г)	: Уфимский НИИНЕФТЕХИМ	:	: Рижский медицинский институт
18. : Спектрофотометрическое измерение концентрации ангидрида триэтиловой кислоты	: Рижский медицинский институт	:	: Рижский медицинский институт
19. : Газохроматографическое измерение концентрации Бис-N,N-гексаметиленкарбамида (карбосида)	: Рижский медицинский институт	:	: Рижский медицинский институт

1 :	2	:
20. : Хроматографическое измерение концентрации Бис-фосфита	Львовский : медицинститут	
21. : Газохроматографическое измерение концентрации диметилсебакината	Ростовский-на-Дону : медицинститут	
22. : Газохроматографическое измерение концентрации диметилфосфита	Львовский : медицинститут	
23. : Газохроматографическое измерение концентрации рации изопропенилацетилена	НИИ ГТ и ПЗ : АМН СССР : НПО "НАИРИТ" : г.Ереван	
24. : Фотометрическое измерение концентрации красной и желтой кровяной соли	Донецкий : медицинститут	
25. : Фотометрическое измерение концентрации ламинофора Р-385	Ставропольский : медицинститут	
26. : Газохроматографическое измерение концентрации трации монобензилтолуола	Донецкий : медицинститут	
27. : Фотометрическое измерение концентрации 3-нитро-4-хлоранилина	Казанский университет : ситет Н.И.Савельева : ва	
28. : Пламенно-фотометрическое измерение концентрации растворимых соединений рубидия	Г-ня Московский : медицинститут	
29. : Хроматографическое измерение концентрации тиаотреххлористого фосфора	Львовский : медицинститут	
30. : Газохроматографическое измерение концентрации рации тримеллитовой кислоты	Уфимский : НИИНЕФТЕХИМ	
31. : Хроматографическое измерение концентрации трия триметилфосфита	Львовский : медицинститут	
32. : Газохроматографическое измерение концентрации трации триэтилортоацетата	Университет : друзья народов : им. П.Лумумбы	
33. : Газохроматографическое измерение концентрации трации 3-феноксидбензальдегида	Университет : друзья народов : им. П.Лумумбы	
34. : Флуориметрическое измерение концентрации фенибута	Рижский медицинститут	

I :	2	:	3
35.: Полярографическое измерение концентрации: : фосфида цинка			ПОЛИУВ, Москва : Киевский НИИ ГТ и ПЭ
36.: Фотометрическое измерение концентрации : : фталазола			ВНИХФИ, г.Купавна
37.: Хроматографическое измерение концентра- : ции хардина			Львовский : мединститут
38.: Фотометрическое измерение концентрации : : хлористого аммония			Армянский : НИИ ГТ и ПЭ
39.: Газохроматографическое измерение кон- : центрации циклогесена			НИИ ГТ и ПЭ

## Приложение 4

Вещества, определяемые по ранее утвержденным  
методическим указаниям

Наименование вещества	Методические Указания
I	2
Сополимеры и полимеры на основе акриловых и метакриловых мономеров	Методические указания на гравиметрическое определение пыли в воздухе рабочей зоны и в системах вентиляционных установок М., 1981, с. 235 (перезданный сборник МУ, выпуски 1-5)
Полиамфолиты ПА-I, ПА-III, ПА-12I	- " -
лагоден	- " -
оксалон	- " -
катализатор ИМ-220I	Методические указания на фотометрическое определение окиси хрома, выпуск М., 1979, с. 108
Титана сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению вольфрама в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М., 1984, с. 13
Вольфрама сульфид и дисульфид	Методические указания по полярографическому измерению концентраций титана в воздухе рабочей зоны, выпуск XIX, М., 1984, с. 129
Сварочный аэрозоль при содержании марганца до 20 %	Методические указания на определение вредных веществ в сварочном аэрозоле (твердая фаза и газы), М., 1981, с.
Сварочный аэрозоль при содержании марганца от 20 до 30 %	:

## Указатель определяемых веществ

- Алкилдифенилоксид (Алотерм-1) 86  
 Алкилпропилендиамин I  
 Ангидрид тримеллитовой кислоты 91  
 Бис-*N,N*-гексаметиленкарбамид (карбоксид) 96  
 Бис- (2-метил-3-окси-4-оксиметил-5-метилпиридил) дисульфида  
 гидроклорида (пиридитол) 5  
 Бис-фосфит 102  
 Бутоксидбутенин 10  
 1,10-декандикарбоновая кислота 17  
 Децила 58  
 Диборид магния 22  
 Диборид титана-хрома 22  
 Диметилсебацат 107  
 Диметилфосфит 112  
 Диортолифенилметан (ингибитор ВНК-А 20) 27  
 Диэтилентриаминпентаацетата меди тринатриевая соль 64  
 Диэтиловый спирт 58  
 Изопропилацетилен 118  
 Карбамид-3(5)-метилпиразол 70  
 Красная и желтая кровяная соль 122  
 Лаурофор Р-385 127  
 Метилдизобутилкарбонат 32  
 Метилцеллозоль 36  
 Метилбензилтолуол 132  
 3-этро-4-хлоранилин 137  
 Рудидия растворимые соединения 145  
 Стронция фосфорнокислая двузамещенная 42  
 Тетрахлористый фосфор 150  
 Тримеллитовая кислота 154  
 Триметилфосфит 75  
 Триэтилортоацетат 165  
 Фикетол 46  
 Фенибут 173  
 3-феноксибензальдегид 169  
 Сульфид цинка 178  
 Фталазол 184



Харшин 189

Хлористый аммоний 193

Циклодеканол 50

Циклодеканон 50

Циклогексен 198

Цинковый комплекс нитрилотрифенилфосфоновой кислоты  
тринатриевой соли и растворимого железного комплекса  
нитрилотриметилфосфоновой кислоты динатриевой соли 80

## Содержание.

1. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации алкилпропилендиаминна в воздухе рабочей зоны .....	1
2. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации бис-(2-метил-3-окси-4-оксиметил-4-метилпиридин) дисульфида дигидрохлорида (пиридитол) в воздухе рабочей зоны .....	5
3. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бутоскибутенина в воздухе рабочей зоны .....	10
4. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации I, IO декандикарбоновой кислоты (I, IO ДДК) в воздухе рабочей зоны .....	17
5. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диборида магния, диборида титана-хрома и металллокерамического сплава (на основе диборида титана-хрома) в воздухе рабочей зоны .....	22
6. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации диморфолинфенилметана (ингибитор ИИХ-Л-20) в воздухе рабочей зоны .....	27
7. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации метилизобутилкарбинола в воздухе рабочей зоны .....	32
8. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации метилцеллозолва в воздухе рабочей зоны .....	36
9. Методические указания по пламеннофотометрическому измерению концентраций стронция фосфорнокислого двузамещенного в воздухе рабочей зоны .....	42
10. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации фенетол в воздухе рабочей зоны .....	46
II. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций циклодеканола и циклодеканола в воздухе рабочей зоны .....	50

12. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации денацила и додецилового спирта в воздухе рабочей зоны ..... 58
13. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации диэтилентриаминпентацетата меди тринатриевой соли (ДТПА  $Zn$ ) в воздухе рабочей зоны ..... 64
14. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации карбамола-3(5)-метилпиразола в воздухе рабочей зоны ..... 70
15. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации триметилфосфита в воздухе рабочей зоны ..... 75
16. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации цинкового комплекса нитрилотрифенилфосфоново́й кислоты тринатриевой соли и растворимого железного комплекса нитрилотриметилфосфоново́й кислоты динатриевой соли в воздухе рабочей зоны ..... 80
17. Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций алкилдифенилоксидов (Алотерма-I) в воздухе рабочей зоны ..... 86
18. Методические указания по спектрофотометрическому измерению концентрации тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны ..... 91
19. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации бис- $M$ -гексаметиленкарбамида (карбоксида) в воздухе рабочей зоны ..... 96
20. Методические указания по измерению концентраций бис-фосфита в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии ..... 102
21. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметиласебацната в воздухе рабочей зоны ..... 107
22. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации диметилфосфита в воздухе рабочей зоны ..... 112

23. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации изопропенилацетилена в воздухе рабочей зоны ..... 116
24. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации красной и желтой кровяной соли в воздухе рабочей зоны ..... 122
25. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации ламинофора Р-385 в воздухе рабочей зоны ..... 127
26. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации монобензилтолуола (МБТ) в воздухе рабочей зоны ..... 132
27. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации 3 нитро-4-хлоранилина в воздухе рабочей зоны ..... 137
28. Методические указания по пламенно-фотометрическому измерению концентрации растворимых соединений рублидия в воздухе рабочей зоны ..... 145
29. Методические указания по измерению концентрации тиотрихлористого фосфора методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны ..... 150
30. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации тримеллитовой кислоты в воздухе рабочей зоны ..... 154
31. Методические указания по измерению концентрации трифенилфосфита методом тонкослойной хроматографии в воздухе рабочей зоны ..... 161
32. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации триэтилортоацетата (ТЭОА) в воздухе рабочей зоны ..... 165
33. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации 3-феноксibenзальдегида (3-ФБА) в воздухе рабочей зоны ..... 169
34. Методические указания по флуориметрическому измерению концентрации фенибута в воздухе рабочей зоны ..... 173
35. Методические указания по полярографическому измерению концентрации фосфида цинка в воздухе рабочей зоны ..... 178

36. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации фталазола в воздухе рабочей зоны .....	184
37. Методические указания по измерению концентрации хаюдина в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии .....	189
38. Методические указания по фотометрическому измерению концентрации хлористого аммония в воздухе рабочей зоны .....	193
39. Методические указания по газохроматографическому измерению концентрации циклогексена в воздухе рабочей зоны .....	198
40. Приложение I .....	202
41. Приложение 2 .....	203
42. Приложение 3 .....	204
43. Приложение 4 .....	208
44. Приложение 5 .....	209